



Triplu-test

34.115.484 @ 281.556

Ref: **34.115.484**

Expediere de laborator: Conform
instrucțiunilor de pe spate.



F-520-05

Pacient _____

Sex M / F Data de naștere _____ ID/Passp _____

Telf _____

email _____

Trimiterea prin e-mail. Parola indicată pe chitanță

Completați toate datele solicitate

Data probei ____/____/____ : ____

SEMNATURĂ în tabel

Autorizez transferul de date către
grupul Teletest

DigesTest

Tel: 0753.909.806 office@diges-test.ro

teletest
Lab Analysis

34.115.484



Triplu-test

Setul contine:

Kit de păr sau unghii

Trusa pentru fecale

Kit urina 24 ore: sticla mica + sticla mare

(3) UN3373 Genți

Condensator la rece hidratabil

Despre Teletest izotermic

Solicitant Autorizez sa trimit raportul solicitantului



Triplu-test

TIP DE PROBA :

☐ Unghii ☐ Păr ☐ Păr pubian



Raport de acces Pentru descarcare web. QR disponibil.

teletest

www.teletest.es Tel +34 932.123.345

Descărcați rezultatele web:

www.teletest.es-> „Rezultatele
mele”

Referinta: **34.115.484**

Cod: **HME Cp**

Sigur pentru acces la raport

Descărcați
rezultatele prin QR

Contact pentru expediere
(Spania):

NACEX: 93.293.84.37

Abonat: **858/90933**

34.115.484



@281.556





Chestionar Metale

Doc 23.485 V.1



Nume, Prenume:

Data de nastere:

/ /

Motivul probei

Tipul eșantionului

☐ Păr ceafa ☐ Unghii ☐ Urina
☐ Păr pubian ☐ Saliva ☐ Fecale

Tip de săpun

☐ Sampon ☐ Copli
☐ Balsam ☐ Anti-matreața

Culoarea naturală a parului

☐ Roșu ☐ Gri ☐ Negru
☐ Maro ☐ Alb ☐ Blond

Ți-ai vopsit părul?

NU DA, culoare:

Ți-ai vopsit recent unghiile?

NU DA, culoare:

Aveți obturație sau proteză metalică?

NU DA

Fumați?

NU DA

Aveți tatuaje și/sau piercing-uri?

NU Tatuajes Piercings Cercei

Ai un DIU?

NU DA

In ce zona locuiești?

Câmp sau Munte Zona urbană

Ce mijloace de transport folosești pentru a te deplasa?

☐ Mașină ☐ Bicicletă și/sau scuter
☐ Motocicletă ☐ Transport public

Suferiți de stres și/sau depresie?

NO stres depresie Anxietate

Ai migrene?

NO DA

Ai simptome de oboseală?

NO Fara energie

Câte mese mănânci pe zi?

1 2 3 4 5 6

Câte pahare de apă bei pe zi?


1 2 3 4 5 6 +

Alimentatie

Consum saptamanal

Fructe	Niciodata	1-2	3 o +	zilnic
peste	Niciodata	1-2	3 o +	zilnic
Carne	Niciodata	1-2	3 o +	zilnic
cartofi	Niciodata	1-2	3 o +	zilnic
orez	Niciodata	1-2	3 o +	zilnic
Legume	Niciodata	1-2	3 o +	zilnic
Verdeata	Niciodata	1-2	3 o +	zilnic
Produse de patiserie si dulciuri	Niciodata	1-2	3 o +	zilnic

Păr

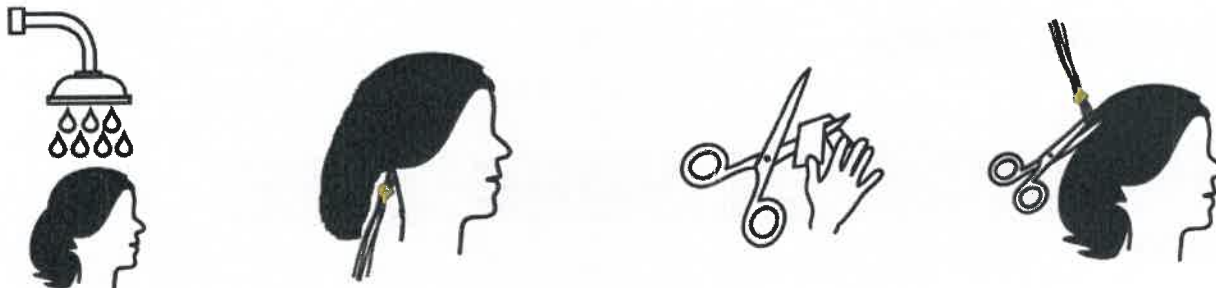

Scaun



- Odată ce cele 3 probe au fost obținute, puneți fiecare dintre ele într-o pungă UN3373 diferită.

- Introduceți condensatorul rece (congelat anterior), pungile cu probe și documentația completată (evitați contactul documentației cu materialul congelat) **în plicul izoterm Teletest**. Păstrați-l în cutia de carton și trimiteți-l la laborator cu punga de transport albă sigilată.

Completați chestionarul atașat.

Teletest garantează că dispozitivele medicale incluse în kit au marcajul CE și declarația de conformitate, în conformitate cu legislația în vigoare privind dispozitivele medicale. În conformitate cu Regulamentul UE 2016/679 (GDPR) privind protecția naturii personale: transferăm datele personale către Teletest Analytika SA astfel încât acestea să fie incluse într-un fișier pentru prelucrare în scopuri de îngrijire tratament. Sunteți autorizat să utilizați datele personale necesare pentru emiterea facturii către entitatea care vă acoperă cheltuielile de sănătate. Autorizez accesul la date de către medicul prescris indicat pentru monitorizarea și tratamentul pacientului. Toate acestea, fără a aduce atingere cazurilor excepționale și autorizațiilor cuprinse în legislația sanitară actuală. Partea interesată își poate exercita drepturile de acces, rectificare, anulare și opoziție în conformitate cu RGPD la adresa companiei c / Montseny 11, 08012 Barcelona Spain, comunicându-i în scris Teletest Analytika SA. data@teletest.es Pentru minori (<14 ani): declar că subsemnatul este tutorele legal al părinți interesate. Indicați cartea de identitate, pașaportul sau echivalentul.